

반려동물용 웨어러블
생체 신호 센서



O'Pet Curv



Connect Easy, Care More



40시간 모니터링 및
클라우드 데이터 저장



심전도(ECG), 심박수(HR),
호흡수(RR), 피부 온도(Skin Temp)



실시간 알람 관리



최대 6개의 O'Pet Curv 센서
동시 모니터링



무독성 하이드로겔 접착 패드



원격 모니터링 지원

bionet
www.ebionet.com/kor

O'Pet Curv

정확하고 편리한 반려동물 건강 모니터링



제품 사양

크기(mm) / 무게(g)	34(w) x 90(l) x 8.5(h) / 18
ECG 채널	1채널
심박수(bpm)	40 ~ 300
호흡수(bpm)	5 ~ 200
피부 온도(°C)	10 ~ 45
연결	블루투스 5.1
배터리 지속시간	약 40시간
방수 등급	IP68
OS	iOS & 안드로이드

패키지



O'Pet Curv, 충전 크래들, 퀵가이드,
일회용 접착 패드 2팩(8개) 포함

구성품



O'Pet Curv 센서



일회용 접착 패드 2팩
(4개/1팩)



USB 충전 크래들





퀵가이드


O'Pet Link 더 나은 진료를 위한 손쉬운 모니터링 및 데이터 공유



O'Pet Link

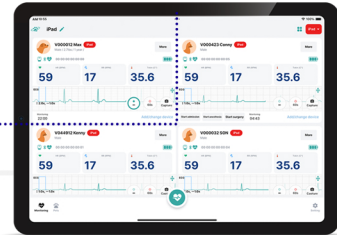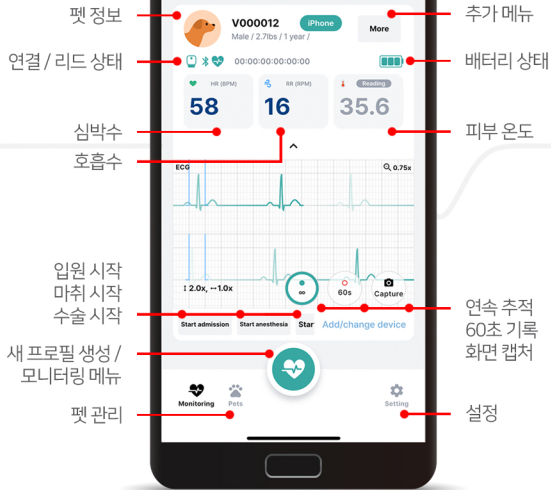

하나의 O'Pet Link 앱에서
6대의 O'Pet Curv 기기를 동시에 연결

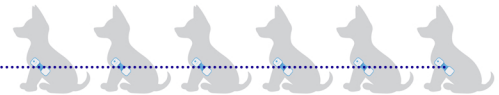

심전도 & 생체 신호 모니터링 생체 신호 연속 추적

심전도 기록



1. 지속 모니터링
심전도 연속 기록
2. 60초 / 알람 이벤트
- 60초 수동 기록
- 알람 발생시 자동 기록
(이벤트 발생 20초전 데이터 포함)
3. 화면 캡처
심전도 스크린샷 저장





60초 수동 기록



알람 발생시 20초
사전 기록을 포함하여 저장

생체 신호 추적

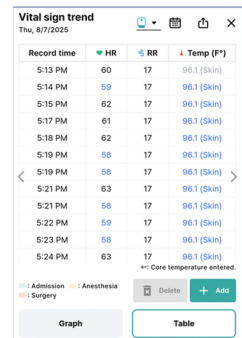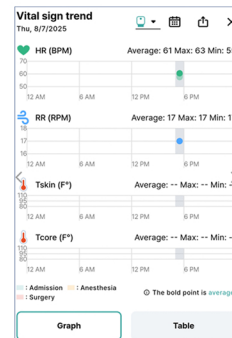

알람 이벤트 모든 데이터가 자동 기록되며,
그래프/표의 형태로 표시 가능

심부 온도 데이터는 '심부 온도 입력' 메뉴에서 수동 입력 가능



Core temperature

95.0

96.1 F°

97.2


Complete

원격 모니터링

어디서나 실시간 원격 접속 및 데이터 공유

‘모니터링 공유’ 메뉴를 통해 QR코드 또는 공유 링크 생성

- QR코드를 스캔하거나 링크를 복사하여 원격 모니터링 시작
- Google 서버를 통한 실시간 원격 접속
- O'Pet Link 앱이 설치된 모든 모바일 기기에서 접근 가능
- 알람 이벤트 및 트렌드는 권한이 부여된 사용자에게 실시간 반영

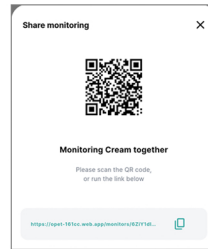


O'Pet Central

다수 환자를 위한 크로스 플랫폼 중앙 모니터링

PC 기반솔루션 O'Pet Central은 웹 브라우저에서 다종의 O'Pet Link와 연결하여 실시간 모니터링을 제공

- 크로스 플랫폼 호환성
 - 안드로이드 또는 iOS의 O'Pet Link에서
 - Windows 또는 MacOS의 O'Pet Central로
- 최대 24마리 환자까지 실시간 원격 모니터링 지원
- O'Pet Link 알람, 스냅샷, 트렌드/리포트 다운로드, 및 공유 완전 원격 제어
- 하나의 O'Pet Central로 멀리 떨어진 클리닉도 한눈에 모니터링

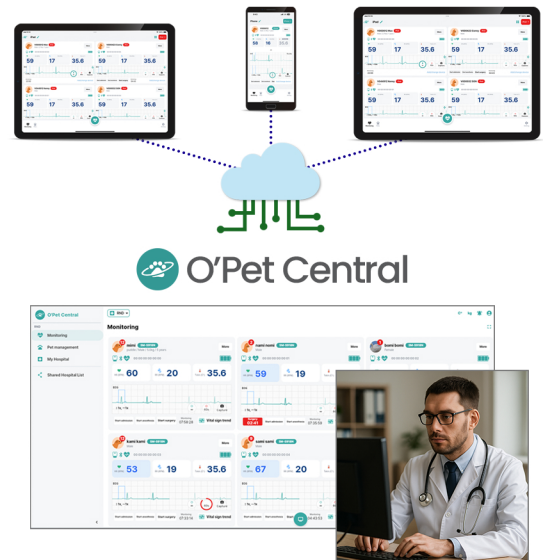

bionet

www.ebionet.com/kor

바이오넷
서울시 구로구 디지털로31길 61, 5층
(구로동, 드림마크원데이터센터)
TEL: 02-6292-6410
E-mail: domestic.sales@ebionet.com